



FR

Airway Medix Oral Care

MODE D'EMPLOI

1.1. INDICATION D'UTILISATION

Ces instructions concernent les produits suivants :

**Brosse à dents B-Care Toothbrush
#32200
Pipette de 4 ml
#PE**

Avant d'utiliser la brosse à dents B-CARE TOOTHBRUSH, veuillez lire ces instructions et conserver ce manuel pour future référence.

1.2. IMPORTANT

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Utiliser ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoire non recommandé par le fabricant.


1.3. UTILISATION

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- La brosse à dents B-Care est destinée à maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire, y compris l'élimination de la plaque dentaire. Sont fournies avec ce produit la brosse à dents et deux pipettes pour le chargement de liquides.

1.4. ATTENTION



- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Manipuler et conserver correctement. NE PAS démonter le produit.
- NE PAS utiliser si l'emballage a été endommagé.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement aux fins prévues.
- Non stérile. NE PAS essayer de stériliser ce produit.
- NE PAS utiliser ce produit si des pièces présentent des signes de dommages. Cela pourrait entraîner des blessures.
- Le produit est destiné à un usage unique.

2. DESCRIPTION

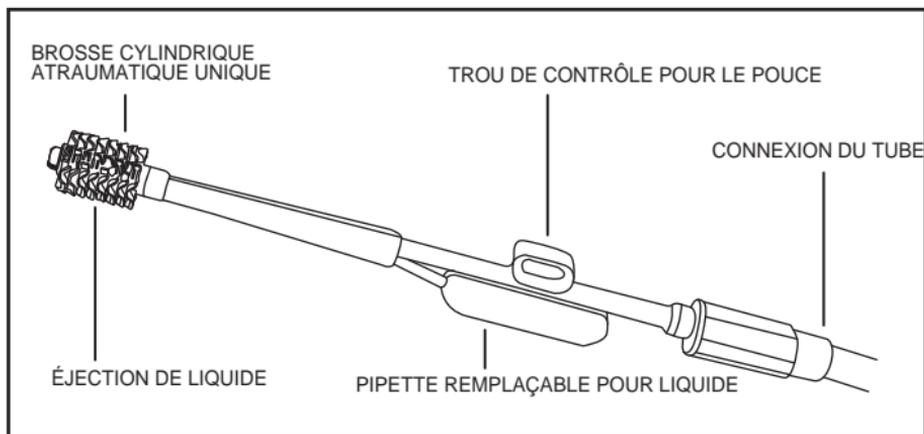


3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 3.1. Insérer la pipette pour charger un liquide de nettoyage [Figure 1].
- 3.2. Insérer la pipette dans la brosse à dents [Figure 2].

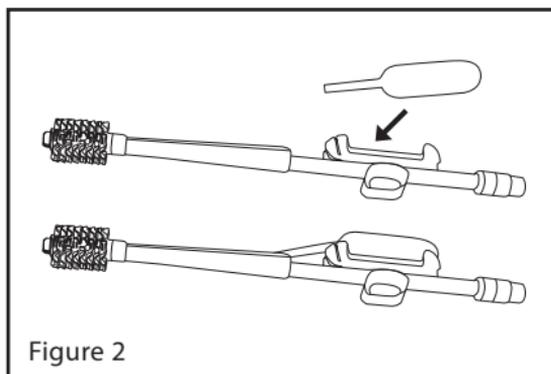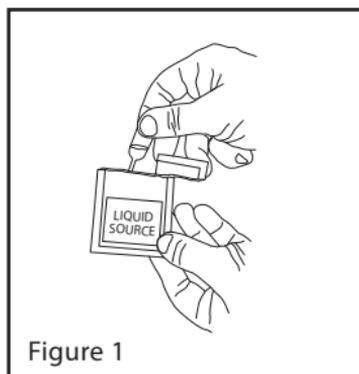

3.3. Tenir la brosse en plaçant le pouce sur le trou de contrôle et un doigt sur la pipette. Appliquer le liquide en appuyant délicatement sur la pipette [Figure 3].

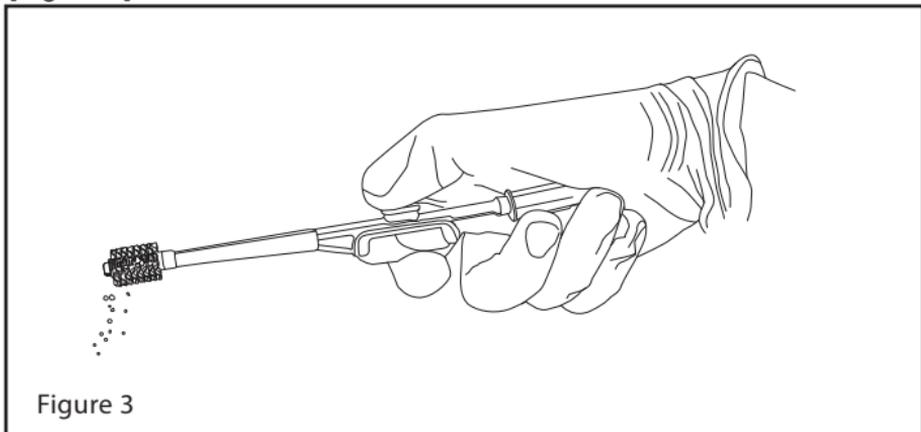

4. GARANTIE

Nous accordons une garantie de 2 ans sur le produit à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous réparons gratuitement tout défaut de l'appareil dû à des défauts de matériaux ou de fabrication, soit en réparant, soit en remplaçant l'appareil entier, selon notre choix.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages dus à une mauvaise utilisation, l'usure normale, les défauts mineurs qui n'affectent pas le fonctionnement ni la valeur de l'appareil. La garantie est nulle si les réparations sont effectuées par des personnes non autorisées et si des pièces originales de Biovo Technologies ne sont pas utilisées. Pour bénéficier du service pendant la période de garantie, remettre ou envoyer l'appareil complet à votre représentant commercial.

Biovo Technologies Ltd.

23rd HaMelacha Street, POB 11419

Park Afek, Rosh-HaAyin, 4809173, Israel

Tél. : (+972) 72-2151115 | Fax : (+972)

72-2151112

E-mail : info@biovo-tech.com

Fabriqué pour :

Airway Medix S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 11/14, 01-510 Warsaw, Poland

Tél. : +48 22 408 44 80 | E-mail:

info@airwaymedix.pl

Assemblé et emballé au Royaume-Uni

