



**PT**

---

**Higiene Bucal Airway Medix**  
**INSTRUÇÕES DE USO**

---

## 1. INDICAÇÃO DE USO

Instruções para uso dos seguintes produtos:

**Escova de dentes B-Care**

**#32200**

**Pipeta de 4 ml**

**#PE**

Antes de usar a **ESCOVA DE DENTES B-CARE**, leia estas instruções e guarde este manual para consulta futura.

### 1.2. IMPORTANTE

- Este produto não deve ser usado por crianças.
- Este produto deve ser usado apenas para o uso projetado, conforme descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.


### 1.3. USO PROJETADO

- Este produto não deve ser usado por crianças.
- A escova de dentes B-Care foi projetada para manter uma boa higiene bucal, incluindo a remoção da placa bacteriana. O produto inclui a escova de dentes e duas pipetas para carregar líquidos.

### 1.4. ATENÇÃO

- Este produto não deve ser usado por crianças.
- Manuseie e guarde adequadamente. NÃO desmonte o produto.
- NÃO USE se a embalagem estiver danificada.
- O dispositivo só deve ser usado para a finalidade projetada.
- Não esterilizado. Este produto NÃO DEVE ser esterilizado ou colocado em autoclave.
- Não use o produto se alguma peça apresentar sinais de dano. Isso pode causar lesões.
- Produto de uso único



## 2. DESCRIÇÃO

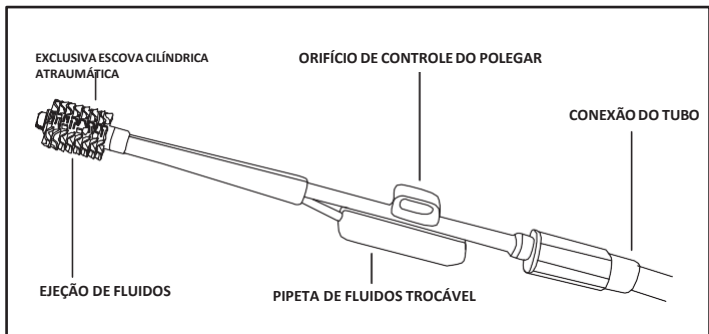

## 3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DA B-CARE

3.1. Insira a pipeta para carregar líquidos de limpeza [Figura 1].

3.2. Conecte a pipeta à escova [Figura 2].

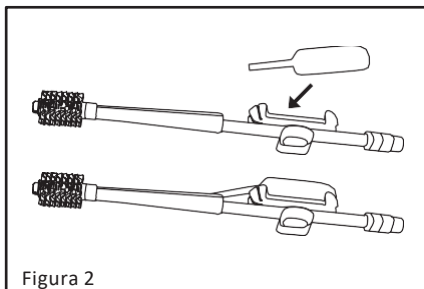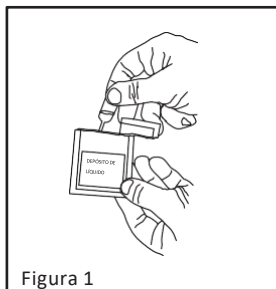

**3.3.** Segure a escova com o polegar sobre o orifício de controle do polegar, e os dedos sobre a pipeta. Para aplicar líquidos, pressione suavemente a pipeta [Figura 3].

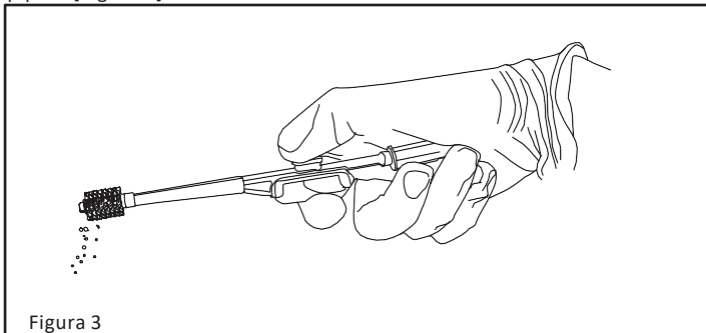


Figura 3

## 4. GARANTIA

Este produto tem garantia de 2 (dois) anos a partir da data de sua compra. Durante o período de garantia, consertaremos gratuitamente quaisquer defeitos no aparelho, que sejam resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra, seja através de conserto ou substituição total do aparelho, a nosso critério.

Esta garantia não cobre: danos causados por uso inadequado, desgaste ou uso normal, defeitos que tenham efeito insignificante no valor ou na operação do aparelho. A garantia será cancelada em caso de reparos realizados por pessoas não autorizadas e caso não sejam utilizadas peças originais da Biovo Technologies. Para obter assistência técnica durante o período de garantia, entregue ou envie o aparelho completo ao seu representante de vendas.

### **Biovo Technologies Ltd.**

23rd HaMelacha Street, POB 11419 Park  
Afeq, Rosh-HaAyin, 4809173, Israel  
Tel.: (+972) 72-2151115 | Fax: (+972) 72-2151112  
E-mail: [info@biovo-tech.com](mailto:info@biovo-tech.com)



Fabricado para:

### **Airway Medix S.A.**

ul. Gen. Józefa Zajączka 11/14, 01-510 Varsóvia, Polônia  
Tel.: +48 22 408 44 80 | E-mail: [info@airwaymedix.pl](mailto:info@airwaymedix.pl)  
**Montado e embalado no Reino Unido**



002-06-LAB Rev.00