



IT

Airway Medix Oral Care

ISTRUZIONI PER L'USO

1.1. INDICAZIONI PER L'USO

Queste istruzioni sono destinate all'uso dei seguenti prodotti:

Spazzolino B-Care # 32200

Pipetta da 4 ml

#PE

Prima di utilizzare **B-CARE TOOTHBRUSH**, leggere le presenti istruzioni e conservare questo manuale per riferimenti futuri.

1.2. IMPORTANTE

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini.
- Utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.


1.3. USO PREVISTO

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini.
- Il B-Care è uno spazzolino da denti destinato a mantenere una buona igiene orale, compresa la rimozione della placca. La confezione include lo spazzolino da denti e due pipette per il caricamento di liquidi.

1.4. AVVERTENZE



- Il prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini.
- Maneggiare e conservare correttamente. **NON** smontare il prodotto.
- **NON** utilizzare se l'imballaggio è stato danneggiato.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Non sterile. **NON** tentare di sterilizzare, neanche con autoclave, questo prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta parti danneggiate. Ciò può causare lesioni.
- Il prodotto è esclusivamente monouso.

2. DESCRIZIONE

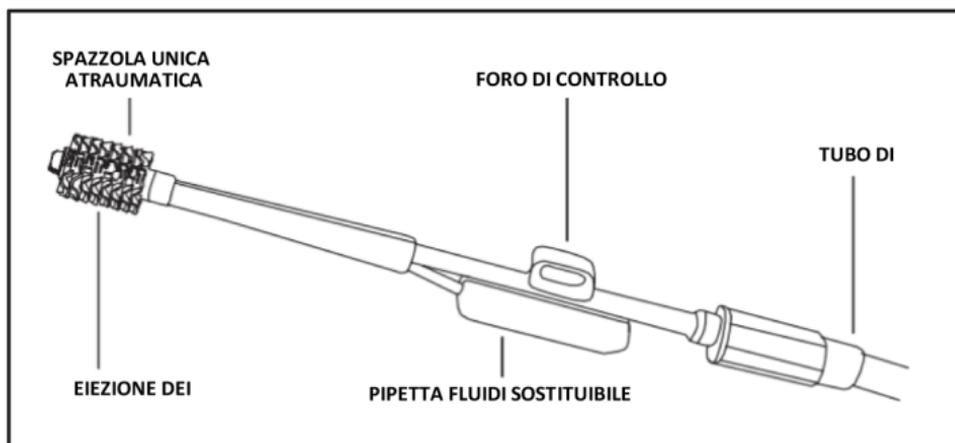

3. ISTRUZIONI PER L'USO DI B-CARE

- 3.1. Inserire la pipetta per caricare i liquidi di pulizia [Figura 1].
- 3.2. Collegare la pipetta allo spazzolino [Figura 2].

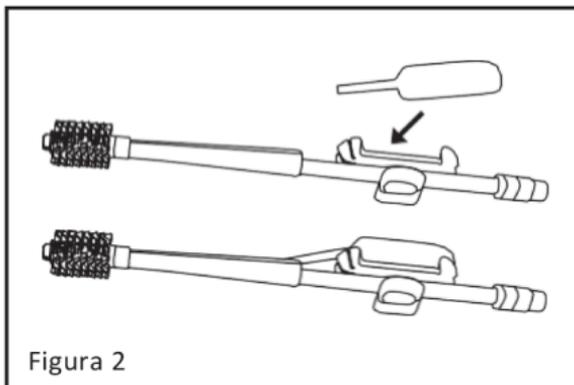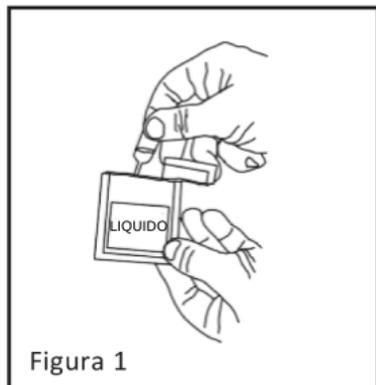

3.3. Tenere lo spazzolino mantenendo il pollice sul foro di controllo del pollice e toccare la pipetta con il dito. Applicare i liquidi premendo delicatamente sulla pipetta [Figura 3].

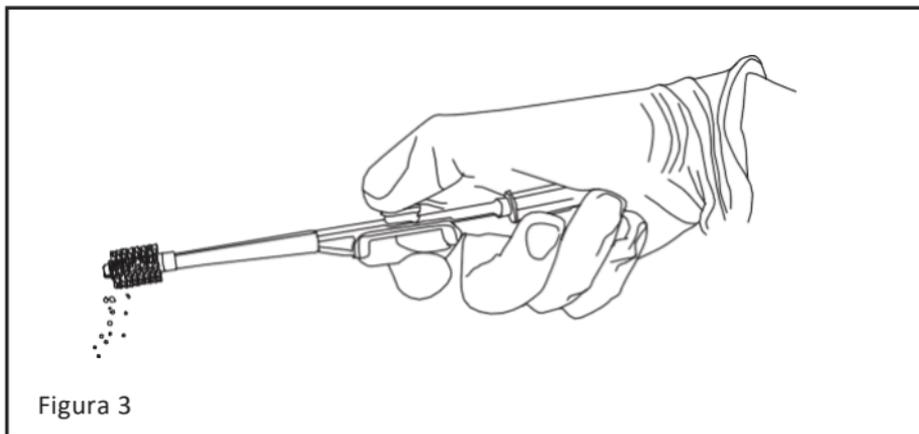


Figura 3

4. GARANZIA

Assicuriamo 2 anni di garanzia sul prodotto a partire dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia elimineremo, gratuitamente, qualsiasi anomalia del dispositivo derivante da difetti nei materiali o nella lavorazione, mediante riparazione o sostituzione dell'apparecchio, a nostra scelta.

Questa garanzia non copre: danni causati da uso improprio, normale usura o utilizzo e difetti con un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio. La garanzia decadrà qualora venissero effettuate riparazioni da persone non autorizzate e qualora non venissero utilizzate parti originali Biovo Technologies. Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, consegnare o inviare l'apparecchiatura completa al venditore.

Biovo Technologies Ltd. 23rd
HaMelacha Street, POB 11419 Park
Afek, Rosh-HaAyin, 4809173, Israel
Tel: (+972) 72-2151115 | Fax: (+972) 72-2151112
Email: info@biovo-tech.com



Prodotto per:
Airway Medix S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 11/14, 01-510 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 408 44 80 | Email: info@airwaymedix.pl
Montato e imballato nel Regno Unito

